


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДУШКА МАССАЖНАЯ SM-329XA

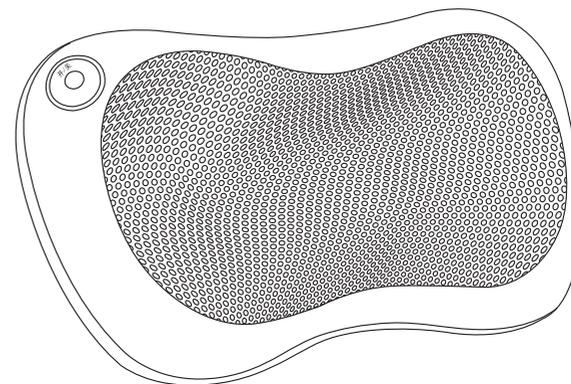

Подушка массажная SM-329XA

Размеры: 33 x 18 x 11 см

Вес: 1,2 кг

Мощность: 30W

Питание: от сети/авторозетки

Необх. напряжение: AC 100~240V/DC 12V 2.5A

Функция подогрева для ускорения циркуляции крови

Перед использованием необходимо настроить уровень
тепла и массажа по вашему желанию

В комплекте адаптор для 12V

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности при использовании массажера

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание поражения электрическим током рекомендуется отключать массажер от электрической сети сразу после сеанса массажа и перед чисткой

ВНИМАНИЕ Во избежание риска возгорания, пожара, удара током или травм рекомендуется:

- 1) Массажер не должен быть без присмотра если он включен в сеть. Отключайте массажер от сети если долго его не используете, при съеме деталей или их помещении обратно
- 2) Не накрывайте и не используйте массажер накрытый одеялом или подушкой. Образование чрезмерного тепла может привести к пожару, поражению электрическим током и травмам
- 3) Необходим непосредственный контроль взрослого человека если массажером пользуется ребенок, человек с ограниченными способностями или инвалид
- 4) Рекомендуется использовать массажер только по назначению. Запрещается использовать дополнительные элементы не предусмотренные производителем
- 5) Если провод питания поврежден, рекомендуется заменить его производителем, агентом производителя или уполномоченной организацией
- 6) Не рекомендуется транспортировать массажер за провод питания
- 7) Держите провод питания вдали от источников тепла
- 8) Не используйте массажер с заблокированными воздушными отверстиями. Содержите отверстия в чистоте
- 9) Не роняйте и не вставляйте какие-либо объекты в отверстия
- 10) Запрещается использовать вне помещения
- 11) Запрещается использовать массажер в местах распыления аэрозолей, спреев или в местах, где ограничен доступ кислорода
- 12) Для того, чтобы отсоединить массажер от провода питания, отключите все контроллеры и вытащите провод из розетки
- 13) Массажер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, с сенсорными или умственными недостаточностями или с недостатком опыта и знаний, если не получили должных инструкций по использованию продукта от человека ответственного за их безопасность
- 14) Дети должны использовать массажер под присмотром для того, чтобы убедиться, что они не злоупотребляют им
- 15) Аккуратно используйте нагревающие поверхности. Они могут привести к возгораниям. Запрещается использовать на нечувствительных кожных покровах или в случае плохой циркуляции крови. Использование массажера детьми без присмотра или недееспособными людьми опасно.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОХРАНИТЬ
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАССАЖЕРА**

**СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ**


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Подключите массажер к сети
- 2) Нажмите кнопку включения. Массажер начнет работу в автоматическом режиме с функцией нагревания. Сеанс массажа в автоматическом режиме длится 20 минут.
- 3) Нажмите кнопку повторно и функция нагревания отключится. Сам массаж, тем временем, будет продолжаться.
- 4) Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы отключить массажер

ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ



НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

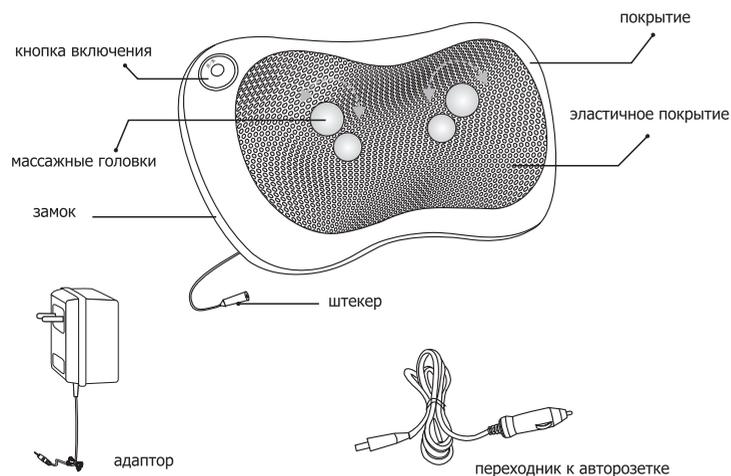

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Чистка

Перед чисткой убедитесь, что массажер отключен от сети
Для чистки рекомендуется использовать сухую ткань



ВНИМАНИЕ

Не протирайте массажер бензином или другими агрессивными агентами для очистки

Уход

Убедитесь, что массажер отключен от сети. Храните массажер в чистом виде и вдали от влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Подушка массажная
Модель: SM-329XA
Номинальное напряжение: DC12V, 2.5A
Номинальная мощность: 30Вт

